


We Normalize Speed

CyBio FeliX SELECT Head




CyBio FeliX
SELECT Head 8/250 μ l

analytikjena
An Endress+Hauser Company

CyBio FeliX

SELECT Head 8/50 μ l

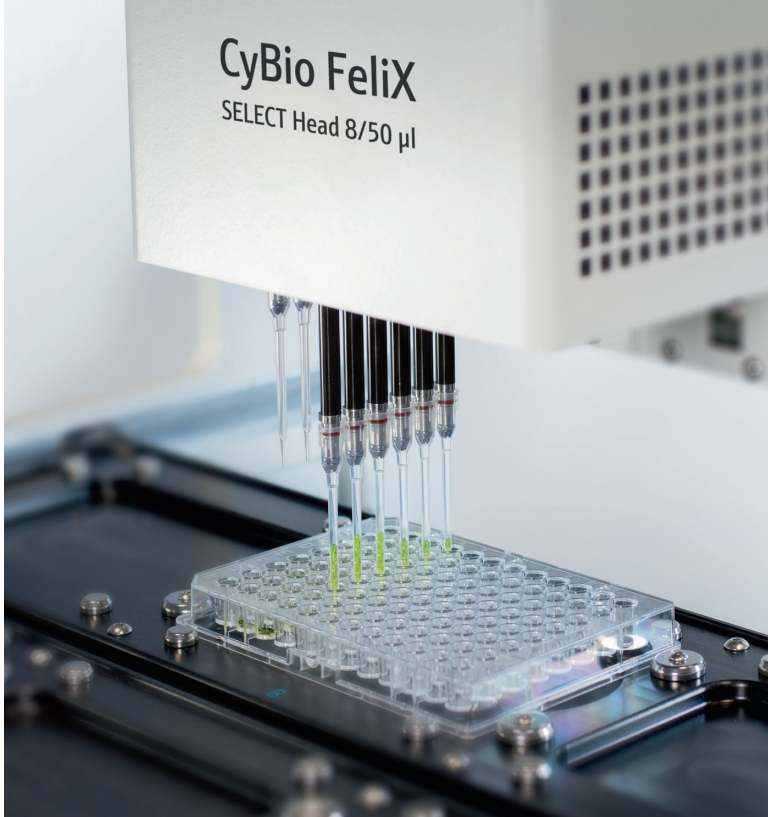

SELECT Headは8つの独立したチャンネルとボリューム設定を備えた新しいHeadです。

ワークフローはCSVファイルから直接実行することができ、複雑なプログラミングから解放します。ピペティングのボトルネックを回避し、単一のチップを使用するよりも速く自動化することができます。


What you get:

- **作業効率の向上:** 分注タスクをより速く、より少ない労力で完了できます。
- **プリセットされた複数のアプリケーション:** ワークフローには基本的なデータ処理とレポート作成が含まれ、カスタム処理や計算などのオプションも追加可能です。
- **高い適応性:** SELECT ヘッドの可変チャンネルはさまざまな分注量に対応することができます。また、さまざまなパターンやプレートタイプにすばやくリフォーマットすることができます。

Key Supported Applications


Hit Picking

96 および 384 フォーマットで 8 つのウェルを同時に選択することができます。反復動作を減らすことでワークフローを高速に処理します。

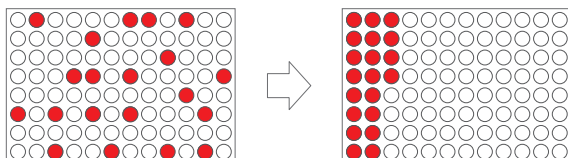

Normalization

サンプルを設定した濃度と量にすばやくノーマライズします。SELECT Headは、1 回の操作で最大 8 種類の異なる量のサンプルと希釈液を吸引できます。インポートしたファイルから必要な量を自動計算することができます。

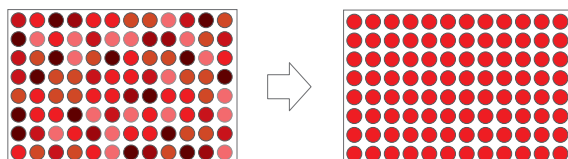

Need help getting started?

当社のアプリケーションチームが、お客様のあらゆる課題をサポートします。柔軟性の高い SELECT Headは幅広いタスクに対応できるため、お客様のニーズに合ったソリューションを見つけることができます。

sales.jp@analytik-jena.com までお気軽にお問い合わせください。

What is Your Challenge?

最適なSELECT Headを選択

SELECT Headを新規または既存の CyBio FeliX 機器と組み合わせることができます。

1 μL ~ 1000 μL の容量範囲を備えた SELECT Headにより、様々なアプリケーションを自動化できます。

SELECT Head 8/50 μL

Order Number: OL3318-14-410

Plate format: 96, 384 wells and tubes

Volume range: 1 – 50 μL

Specified volume range precision:

3 – 5 μL \leq 3%

5 – 50 μL \leq 2%

SELECT Head 8/250 μL

Order Number: OL3318-14-420

Plate format: 96, 384 wells and tubes

Volume range: 5 – 250 μL

Specified volume range precision:

10 – 25 μL \leq 3%

25 – 250 μL \leq 2%

SELECT Head 8/1000 μL

Order Number: OL3318-14-430

Plate format: 96, 384 wells and tubes

Volume range: 10 – 1000 μL

Specified volume range precision:

25 – 100 μL \leq 3%

100 – 1000 μL \leq 2%



CyBio FeliX SELECT Headの情報はこちら



© 2024 Analytik Jena GmbH+Co. KG
888-80001-2-F
Version 1.0 - JP - 02/2025

Pictures: Analytik Jena GmbH+Co. KG

Subjects to changes in design and scope of delivery as well as further technical development.

株式会社アナリティクイエナジャパン

本社 〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134

横浜ビジネスパークイーストタワー 11階

Tel 045-340-5740 Fax 045-340-5745

e-mail sales.jp@analytik-jena.com

URL <https://www.analytik-jena.co.jp/>

analytikjena

An Endress+Hauser Company